

FALLPREVENTION – Alerta Medical

Tryggare vård- och omsorgsmiljöer med rätt larm på rätt plats

När fallrisk, nattliga vandringar eller oplanerade förflyttningar behöver upptäckas tidigt krävs lösningar som är både pålitliga och enkla att använda. Med trampmattor för golv, säng- och stol-larm samt vakter, mottagare och larmknappar kan personalen få tidiga varningar och bättre förutsättningar att agera snabbt.

Trygg fallprevention med rätt teknik på rätt plats

LOTS Security erbjuder tillsammans med Alerta Medical användarvänliga och beprövade lösningar för fallprevention i vård- och omsorgsmiljöer. Med kundanpassade larmgivare, såväl trådbundna som trådlösa, blir det lättare att upptäcka risker i tid, förebygga fall och skapa en tryggare vardag för både vårdtagare och personal.

Beprövade lösningar för olika behov

Sortimentet omfattar lösningar för golv, säng, stol, dörrar och fönster samt produkter för fuktdetektering och trådlös larmhantering. Det gör det möjligt att anpassa fallpreventionen efter både verksamhetens rutiner och den enskilda brukarens behov.



Flexibla system för enkel användning

Systemen kan användas både som fristående larm eller integreras med befintliga kallelselarm. Det ger en smidig installation och gör det enklare att skapa en lösning som fungerar i praktiken.

Trygghet i det dagliga arbetet

Med rätt teknik på rätt plats får personalen tidiga varningar och bättre förutsättningar att agera snabbt. Resultatet blir ökad säkerhet, minskad stress och en tryggare miljö för alla som vistas i verksamheten.

Alerta Medical – är en etablerad leverantör och tillverkare av medicintekniska produkter med fokus på att förbättra säkerhet och komfort inom vård och omsorg. Företaget bygger på flera generationers erfarenhet och är internationellt representerat genom ett brett nätverk av distributörer.



Produktöversikt och lösningar för fallprevention

Trampmattor

Trampmattorna används vid dörröppningar, sängar och andra passager där personalen behöver en tidig indikation på att någon lämnar en säker zon.

Trampmatta

Ett robust och lättplacerat alternativ för daglig drift. Finns som trådbundet eller trådlöst system och lämpar sig där säker funktion och snabba larm när någon avviker.



- Trådbundet eller trådlöst.
- Hygieniskt, antibakteriellt ytskikt.
- Storlek 60 x 90 cm.
- Säkerhetskabel för minskad snubbelrisk på den trådbundna versionen.

Specialmattor

Vi kan leverera flertalet olika mattor med tyg- och träfinish. Kontakta oss för en närmre beskrivning och leveranstider. Specialmattor finns både som trådbundna och trådlösa enheter.



Säng- och stollarm


Säng- och stollarm som ger tidig varning när någon lämnar sängen eller stolen. De kan användas lokalt med våra trådlösa kontrollenheter eller kopplas till kallelselarmet beroende på verksamhetens behov.

Sänglarm



- Placeras diskret under lakanet ovanpå madrassen och larmar när brukaren lämnar sängen.
- Automatiskt återställs när personen lägger sig igen.
- Yta: 25 x 76 cm.
- Trådbundet eller trådlöst.

Stollarm

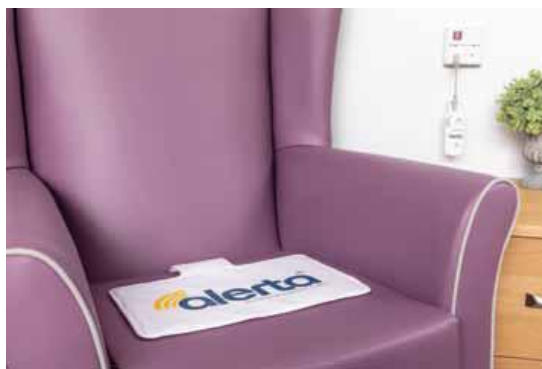

- Placeras under sittdynan och larmar när brukaren lämnar stolen.
- Automatisk återställning när personen sätter sig igen.
- Yta: 25 x 38 cm.
- Trådbundet eller trådlöst.

De trådbundna enheterna levereras tillsammans med kontrollenhet som kopplas in i ert befintliga kallelselarm. Kontrollenheten kan drivas på batterier eller med en nätadapter.

Trådlöst, enkelt och portabelt

De trådlösa enheterna övervakas via kontrollenheten som antingen kan användas helt fristående som en bärbar larmmottagare eller kopplas till ert befintliga kallelselarm. Den trådlösa kontrollenheten kan drivas på batterier eller med en nätadapter.

Varje bärbar mottagare kan övervaka upp till fem separata larmgivare som enkelt kan särskiljas vid larm genom de fem indikeringsdiодerna. Enheten har även inbyggd larmsignal för att uppmärksamma personalen när ett larm aktiverats.



Automatiska larm, larmknappar och mottagare

Trådlösa larm gör det möjligt att snabbt öka tryggheten för vårdtagaren och larmar direkt till personalen för snabba insatstider, våra trådlösa larm gör det enkelt att öka tryggheten i vårdmiljön.


Rörelsevakt



IR-baserad rörelsedetektering som lämpar sig vid dörr eller säng. Larmar när rörelse bryter strålen och larmar direkt till personalen.

- Finns som trådbunden och trådlös.
- Batteri- eller nätdrift.
- Inbyggt larm, låg batterivarning.
- Snooze/hold-funktion.


Dörr- och fönstervakt

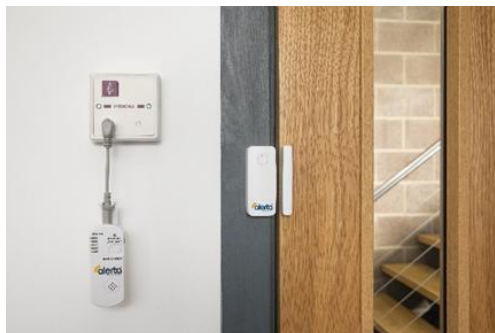

En smidig lösning för att övervaka dörrar och fönster och larmar när dörr eller fönster öppnas.

- Trådlös tillsammans med den trådlösa mottagaren.
- Upp till 95 m räckvidd.
- Monteras på dörr/fönster och karm.

Kontrollenhet för trådlösa larm

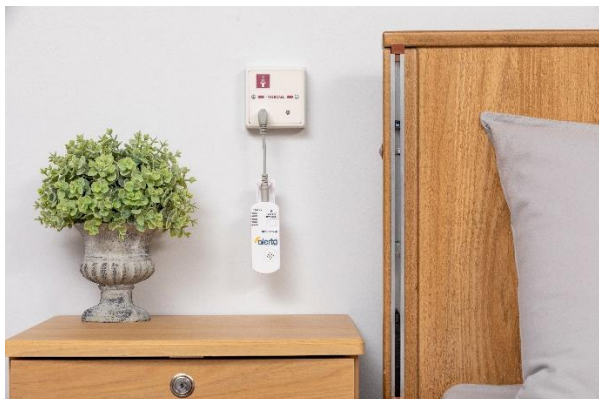

Navet i det trådlösa systemet. Kan kopplas till larmsystem eller användas lokalt och paras med upp till fem trådlösa enheter. Varje trådlös enhet har sin egen kanal och indikeras med de inbyggda lysdioderna.

- Hög, låg eller tyst volym.
- Batteri- eller nätdrift.
- Stöd för 5 trådlösa enheter.

Larmknappar




Trådlös larmknapp som levereras med vägghållare, halsband och armband för flexibel användning.

- Kan bäras på handled eller runt halsen.
- Kan användas i duschmiljö.
- Trådlös räckvidd upp till 95 m.
- Ansluts till den trådlösa kontrollenheten.


Fuktlarm - när enures snabbt behöver upptäckas

Fuktlarm finns för både säng och stol och används när fukt snabbt behöver upptäckas och åtgärdas. Lösningen kompletterar fallpreventionen genom att ge trådlös notifiering vid fuktdetektering. Larmmattorna är avsedda för fuktdetektering och inte för att övervaka när någon lämnar säng eller stol, vilket gör dem till ett kompletterande stöd snarare än ett rörelselarm.

Sänglarm

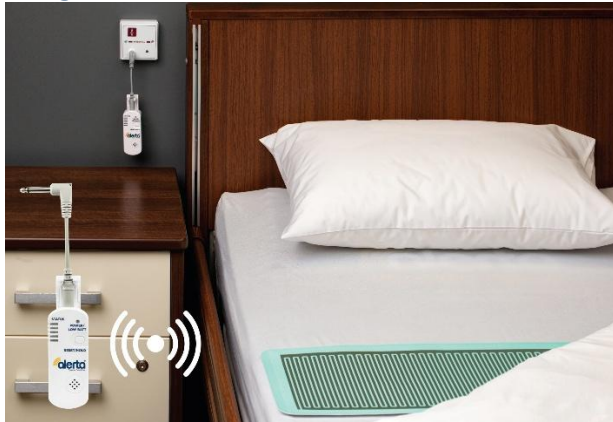

Stollarm

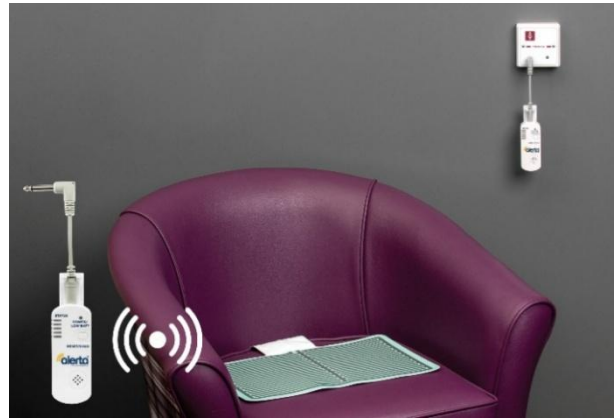

- Finns för säng och stol och används för att informera när enures behöver åtgärdas.
- Kan användas under lakan eller på stol och ge trådlös aktivering mot larmsystem eller fristående kontrollenhet.
- Trådlös räckvidd upp till 95 m.
- Ansluts till den trådlösa kontrollenheten.






Trådlös sändare




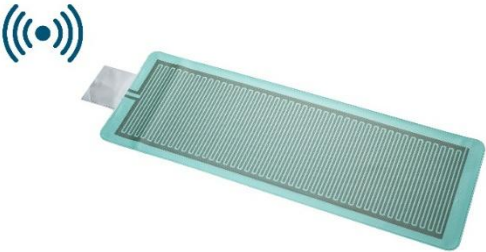



Den trådlösa sändaren används tillsammans med trampmattorna, fuktlarmen eller andra externa larmgivare och har även justerbar fördröjning av larm för att minska falsklarmsrisken.

Enheter och tillbehör

Trådbundna enheter inklusive kontrollenhet	
	<p>Stollarm - tryckkänslig</p> <p>Materialet är hygieniskt, antibakteriellt och lätt att rengöra.</p> <p>Trådbunden version innehåller larmmatta, kontrollenhet och 2 meters kabel.</p> <p>Kan användas fristående eller kopplas till kallelsesystemet.</p> <p>Kan ställas in med direktlarm eller fördröjt med 2 eller 4 sekunder.</p> <p>Ställbar larmsignal, hög, låg el. tyst.</p> <p>Drivs på 9V batteri eller via strömadapter.</p> <p>Stolmatta: 25 x 38 cm</p> <p>Tillverkarens rekommenderade bytesintervall, 1 år</p>
	<p>Sänglarm - tryckkänslig</p> <p>Materialet är hygieniskt, antibakteriellt och lätt att rengöra.</p> <p>Trådbunden version som innehåller larmmatta, kontrollenhet och 2 meters kabel.</p> <p>Kan användas fristående eller kopplas till kallelsesystemet.</p> <p>Kan ställas in med direktlarm eller fördröjt med 2 eller 4 sekunder.</p> <p>Ställbar larmsignal, hög, låg el. tyst.</p> <p>Drivs på 9V batteri eller via strömadapter.</p> <p>Mått: 25 x 76 cm.</p> <p>Tillverkarens rekommenderade bytesintervall, 1 år</p>
	<p>Trampmatta/golvlarm</p> <p>Hygieniskt, antibakteriellt och lätt att rengöra.</p> <p>Slitstarka svetsade fogar och stark kabelinfästning.</p> <p>Säkerhetskontakt för att minska snubbelrisk.</p> <p>Ansluts direkt till kallelselarmet eller kopplas till kontrollenhet (beställs separat) för att kunna användas fristående.</p> <p>Y-kabel ingår så fler enheter kan kopplas till samma rumsapparat.</p> <p>Levereras med 3 meters kabel.</p> <p>Mått: 60 x 90 cm.</p>
	<p>Rörelsevakt</p> <p>Övervakar rörelse i rummet och kan placeras på vägg eller bord.</p> <p>Kan användas fristående med vår trådlösa kontrollenhet eller anslutas direkt till kallelselarmet.</p> <p>Har inbyggd batterivarning, inbyggd larmsignal, justerbar volym samt hold/snooze-knapp.</p> <p>Levereras med vägg/bordsfäste.</p> <p>Drivs med 3xAA batterier.</p>

	<p>Kontrollenhet</p> <p>Används som fristående larmenhet för trådbundna larmgivare eller ansluts till befintligt kallelselarm. Hög, låg och tyst volymkontroll Flera valbara larmsignaler, hög, låg eller tyst. Kan ställas in med direktlarm eller fördröjt med 2 eller 4 sekunder. Batterivarning vid låg nivå Kan drivas via nätadapter eller 9V batteri.</p>
<p>Trådlösa enheter</p>	
<p>De trådlösa larmenheterna används tillsammans med den trådlösa mottagaren och har justerbar timer för larmfördröjning samt indikator för låg batterinivå. Den trådlösa mottagaren har stöd för upp till fem trådlösa larmgivare.</p>	
	<p>Kontrollenhet, trådlös radio</p> <p>Kontrollenhet och mottagare för trådlösa enheter. Kan anslutas till kallelsesystem eller fungera som fristående larm lokalt larm. Ställbar larmsignal, hög, låg el. tyst. Kan ställas in med direktlarm eller fördröjt med 2 eller 4 sekunder. Enheten kan paras trådlöst med upp till fem trådlösa enheter, har indikering med vilken larmenhet som aktiverats. Strömförsörjning via nätadapter eller 2xAA batterier. Levereras med anslutningskabel för anslutning till rumsenhet.</p>
	<p>Larmknapp – trådlös radio</p> <p>Trådlös larmknapp för patienter. Levereras med väggfäste, halsband och armband. Är vattentät och kan användas i duschmiljö. Hygieniskt silikonarmband. Ansluts till den trådlösa kontrollenheten. Batteridrivna 1xCR2450</p>
	<p>Stollarm - tryckkänslig</p> <p>Materialet är hygieniskt, antibakteriellt och lätt att rengöra. Trådlös version som inkluderar sändare, räckvidd upp till 95 meter och kan stallas in med 0/2/4 sekunders fördröjning. Ansluts till den trådlösa kontrollenheten. Drivs med 2xAAA batterier. Mått: 25 x 38 cm Tillverkarens rekommenderade bytesintervall, 1 år</p>
	<p>Sänglarm - tryckkänslig</p> <p>Materialet är hygieniskt, antibakteriellt och lätt att rengöra. Trådlös version som inkluderar sändare, räckvidd upp till 95 meter och kan ställas in med 0/2/4 sekunders fördröjning. Ansluts till den trådlösa kontrollenheten. Drivs med batterier. Mått: 25 x 76 cm. Tillverkarens rekommenderade bytesintervall, 1 år</p>

	<p>Golvalarm/trampmatta - trådlös Hygieniskt, antibakteriellt och lätt att rengöra. Slitstarka svetsade fogar och ficka för placering av sändaren. Trådlös version som inkluderar sändare, räckvidd upp till 95 meter och kan ställas in med 0/2/4 sekunders fördröjning. Ansluts till den trådlösa kontrollenheten. Drivs med 2xAA batterier. Mått: 60 x 90 cm.</p>
	<p>Fönster- och dörrvakt – trådlös Monteras på dörr och karm eller fönster och karm och anslutas till den trådlösa kontrollenheten. Trådlös räckvidd upp till 95 meter. Levereras med larmenhet och magnet. Drivs med 2xAA batterier.</p>
	<p>Rörelsevakt - trådlös Övervakar rörelse i rummet och kan placeras på vägg eller bord. Trådlös version som ansluts till den trådlösa kontrollenheten. Trådlös räckvidd upp till 95 meter. Funktioner omfattar låg batterivarning, inbyggt larm, justerbar volym samt hold/snooze-knapp. Levereras med vägg/bordsfäste. Drivs med 3xAA batterier.</p>
	<p>Sängalarm fuktkänslig – trådlös Informera vårdpersonal när enures behöver åtgärdas. Produkterna är inte avsedda att övervaka om någon lämnar säng eller stol. Trådlös version som inkluderar sändare, räckvidd upp till 95 meter och kan ställas in med 0/2/4 sekunders fördröjning. Ansluts till den trådlösa kontrollenheten. Drivs med 2xAA batterier. Mått: 25 x 76 cm. Dessa mattor har 3 månaders garanti på grund av den typ av substans de regelbundet kommer i kontakt med.</p>
	<p>Stollarm fuktkänslig – trådlös Informera vårdpersonal när enures behöver åtgärdas. Produkterna är inte avsedda att övervaka om någon lämnar säng eller stol. Trådlös version som inkluderar sändare, räckvidd upp till 95 meter och kan ställas in med 0/2/4 sekunders fördröjning. Ansluts till den trådlösa kontrollenheten. Drivs med 2xAA batterier. Mått: 25 x 38 cm. Dessa mattor har 3 månaders garanti på grund av den typ av substans de regelbundet kommer i kontakt med.</p>

	<p>Trådlös sändare</p> <p>För våra trådlösa tryck- och fuktkänsliga larm. Kan även användas till andra larmgivare tillsammans med den trådlösa kontrollenheten. Kan ställas in med direktlarm eller fördröjt med 2 eller 4 sekunder. Varnar vid låg batterinivå. Drivs med 2×AAA-batterier 0, 2 eller 4 sekunders fördröjning för att minska falsklarm</p>
<p>Anslutningskontakter och tillbehör</p>	
<p>Tillbehör och identifiering av kontakt:</p> <p>Det är viktigt att rätt kontakttyp anges vid beställning så att enheterna fungerar korrekt vid leverans. De flesta kallelsealarm använder någon form av standardkontakter och vi har flera av dessa på lager. Har ni någon annan typ av kontakt så kontakta oss så hjälper vi till med en kundspecifik lösning.</p>	
<p>Phonokontakt 6,3 mm – Mono</p>	
<p>Phonokontakt 6,3mm – Stereo</p>	
<p>RJ 10 4/4</p>	
<p>RJ 11 4/6</p>	
<p>Strömadapter</p>	
<p>Förlängningskablar, batterier eller andra tillbehör. Kundspecifik kontakt till kallelsearmsystem Kontakta oss för alternativ.</p>	

Tillbehör och identifiering av kontakt:

De flesta larmsystem använder någon olika standard för anslutning.

Det är viktigt att rätt kontakttyp anges vid beställning så att enheterna fungerar korrekt vid leverans.

Den trådlösa sändaren används tillsammans med flera trådlösa system, har justerbar timer för larmfördröjning samt indikator för låg batterinivå.

Vill du anpassa lösningen till er verksamhet?

Rätt kombination av trappmattor, vakter och tillbehör

LOTS Security hjälper er att välja rätt kombination av larmmattor, vakter och tillbehör för en tryggare arbetsmiljö och snabbare insatser.

Planering och stöd

Vi hjälper er att välja rätt lösning för fallprevention utifrån miljö, arbetssätt och krav på larmhantering.

Kontakta oss så hjälper vi er vidare med nästa steg.

Peter Emanuelsson

peter.emanuelsson@lotsab.se

08-501 22 502

Ylva Hansén

ylva.hansen@lotsab.se

08-501 22 504

www.lotsab.se

Vi hjälper er att skapa tryggare vård- och omsorgsmiljöer med rätt lösning för fallprevention.